

Gebruiksaanwijzing SOA-combinatietest vrouw

Je ontvangt een test-set met een testbuisje. Je mag zelf kiezen welke lichaamsgebieden (vagina, anus en mond) je mee wilt nemen in de test. **Zorg ervoor dat alle gebruikte wattenstaafjes uiteindelijk in hetzelfde buisje geplaatst worden.**


Let op: het testmateriaal is beperkt houdbaar. Controleer daarom de houdbaarheidsdatum die vermeld staat op het testbuisje en op de verpakking van de wattenstaafjes.

De chlamydia en chlamydia/gonorroë combitest voor vrouwen bestaat uit een Hologic Aptima kit met:

- Een testbuisje waar transportvloeistof in zit
- Drie wattenstaafjes (voor vagina, anus en mond)
- Een aanvraagformulier
- Een blauwe of witte transportenvelop met RigidSafetyBag
- Een gebruiksaanwijzing voor afname en transport

Gebruiksaanwijzing kweekafname:

- Vagina: plaats een wattenstaafje in de vagina en draai deze even rond in de vagina. Plaats het wattenstaafje vervolgens in het testbuisje, zonder andere oppervlakken te raken, en breek hem af.
- Anus: breng een wattenstaafje rectaal in en doe daarna het staafje in het testbuisje, zonder andere oppervlakken aan te raken, en breek hem af.
- Mond: neem met een wattenstaafje mondslim af van de amandel helemaal achterin de mond en doe het staafje in het testbuisje, zonder andere oppervlakken aan te raken, en breek hem af.

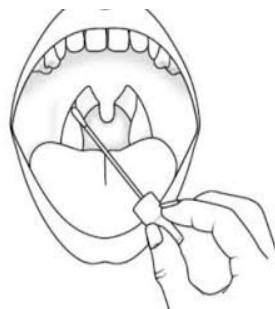

- Sluit het testbuisje inclusief de afgebroken wattenstaafjes. Plaats het buisje vervolgens volgens de instructies in de RigidSafetyBag.
- Stop de RigidSafetyBag in de blauwe/witte retourenvelop.
- **BELANGRIJK: STOP OOK HET AANVRAAGFORMULIER IN DE RETOURENVELOP!**
- Verstuur de blauwe/witte retourenvelop (dus inclusief aanvraagformulier en RigidSafetyBag met buisje) via de post naar het laboratorium.
- Na 3-4 werkdagen is je uitslag in te zien op de website SoaStudentArts.nl. Typ bij 'uitslag' je cliëntnummer in en je krijgt dan direct anoniem de uitslag.

Contact

E-mail: info@soastudentarts.nl

Tel: +31 (0) 50 211 0 911

*For English version see other side

User manual STD combination-test (women)

You will receive a test-set including a tube. You can choose which body areas (vagina, anus, mouth) you want to include in the test. **Make sure that all used cotton swabs are collected in this tube.**

Please note: the testing material has an expiration date. Check the expiration date on the test tube and on the packaging of the cotton swabs.

The chlamydia and chlamydia/gonorrhoea combination test for women contains a Hologic Aptima kit, including:

- A test tube filled with transport liquid
- Three cotton swabs (for vagina, anus and mouth)
- An application form
- A blue or white transport envelope with RigidSafetybag
- A user manual for collection and transport

Collection instructions:

- Vagina: insert the cotton swab into the vagina, and rotate the cotton swab for a few seconds. Carefully put the cotton swab in the tube, avoiding external surfaces, and break it.
- Anus: insert one cotton swab rectally and remove it. Carefully put the cotton swab in the tube, avoiding external surfaces, and break it.
- Mouth: insert one cotton swab reaching the tonsils in the back of the mouth to collect mucus. Carefully put the cotton swab in the tube, avoiding external surfaces, and break it.



- Close the tube including the cotton swabs, and place it according to the instructions in the RigidSafetyBag.
- Put the RigidSafetyBag in the return envelope.
- **IMPORTANT: ALSO INCLUDE THE APPLICATION FORM IN THE RETURN ENVELOPE!**
- Send the package by post to the laboratory using the return envelope.
- After 3-4 business days go to SoaStudentArts.nl. Fill in your client number at 'results' and you will receive your results anonymously.

Contact

E-mail: info@soastudentarts.nl

Phone: +31 (0)50 211 0 911

*Zie ommezijde voor Nederlands